

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	“史耐輝”掌上型負壓傷口治療機	申請醫療器材商	英商史耐輝股份有限公司台灣分公司
--------	-----------------	---------	------------------

“史耐輝”掌上型負壓傷口治療機

“Smith & Nephew” PICO Single Use Negative Pressure Wound Therapy System

批號： 保存期限：

衛部醫器輸字第 025975 號

製造業者名稱： Smith & Nephew Medical Limited

製造業者地址： 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, United Kingdom

醫療器材商名稱：英商史耐輝股份有限公司台灣分公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)

“史耐輝”掌上型負壓傷口治療機

“Smith & Nephew” PICO Single Use Negative Pressure Wound Therapy System

批號： 保存期限：

衛部醫器輸字第 025975 號

製造業者名稱： Smith & Nephew Medical Limited

製造業者地址： 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, United Kingdom


醫療器材商名稱：英商史耐輝股份有限公司台灣分公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)

「本產品提供電子化說明書，如需紙本說明書，請與醫療器材商聯繫」

醫療器材商聯繫資訊：(市售品須刊載使用者如需紙本說明書之聯繫方式)

中文說明書連結網址：(市售品須刊載正確連結網址，且連結內容須與核定本一致)

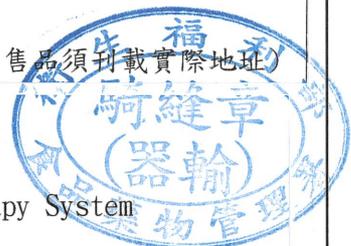

113. 4. 29

註銷規格 114. 6. 18




註銷規格 114. 6. 18



市售醫療器材得僅放置經審查核定之中文說明書。
 但如市售醫療器材同時放置中、外文說明書者，
 外文說明書內容須與核定之中文說明書內容相符。

114. 6. 18
註銷規格

114. 6. 18
註銷規格

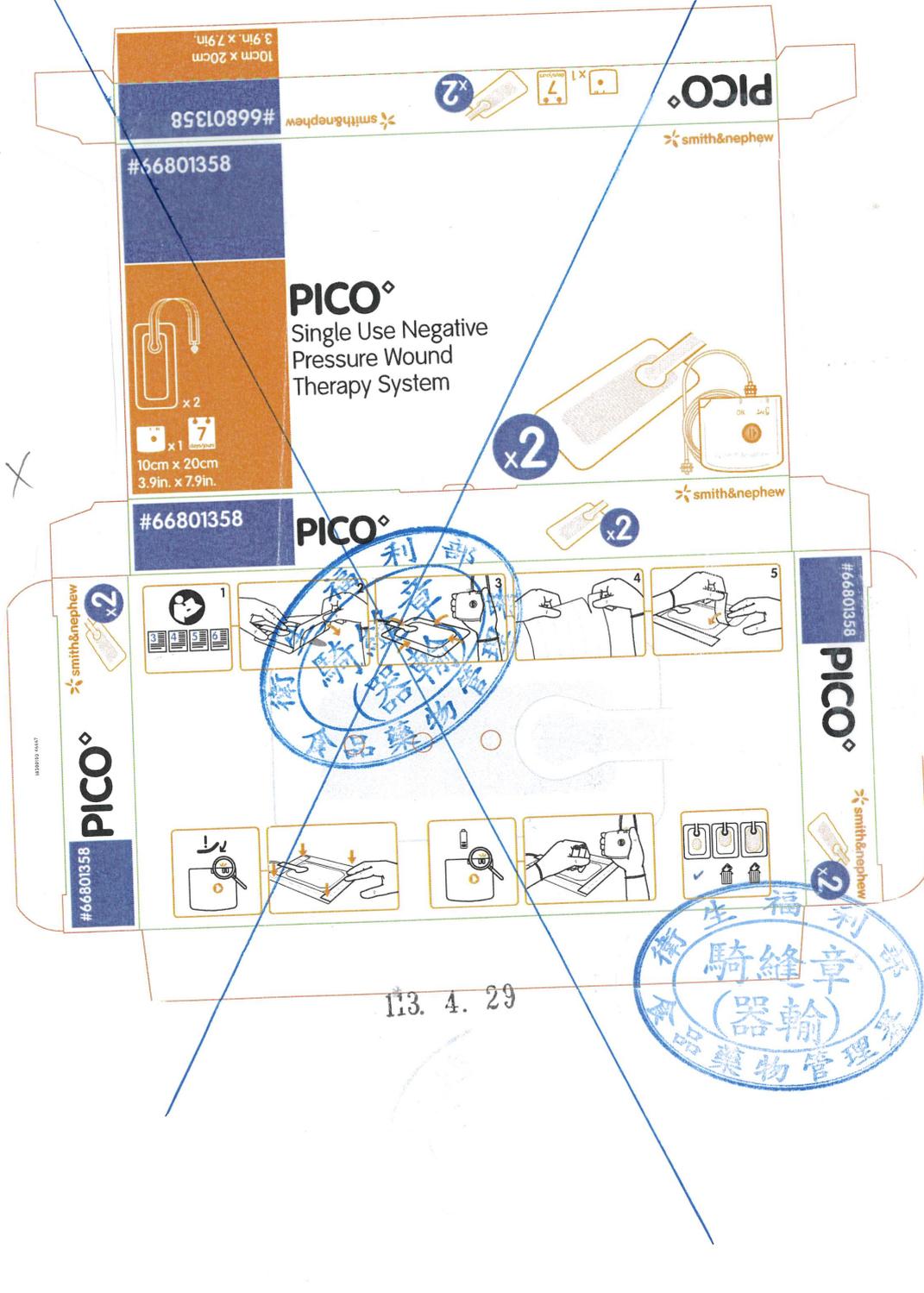

4. 29

113. 4. 29



- ※ 裝訂中文說明書擬稿、最小包裝、標籤，領證時請檢附正本。
- ※ 中文說明書擬稿包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
- ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核，

* 審計長及審計員應於審計報告中，對被審計單位之財務狀況、業務經營、内部控制制度、及遵守法律等事項，予以適當之評價及建議。

* 審計報告應於審計報告中，對被審計單位之財務狀況、業務經營、内部控制制度、及遵守法律等事項，予以適當之評價及建議。

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	“史耐輝”掌上型負壓傷口治療機	申請醫療器材商	英商史耐輝股份有限公司台灣分公司
--------	-----------------	---------	------------------

Multisite

15cm x 20cm

5.9in. x 7.9in.

PICO[◇]

Packaged in UK with individual components made in the following countries:
 Dressing - UK
 Fixation Strips - UK

Smith & Nephew Medical Limited,
 101 Hiesle Road, Hull HU3 2BN England
 Trade Mark of / Marque de commerce de Smith & Nephew
 This product may be covered by one or more US Patents.
 See: www.smith-nephew.com/patents

Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
 Allemenstraße 14, 78532 Tuttlingen, Germany

CE
Rx Only
STERILE EO
2797
MR
100%
100%
100%

113. 4. 29

113. 4. 29

PICO[◇] 14

Single Use Negative Pressure Wound Therapy System

Smith & Nephew Medical Limited,
 101 Hiesle Road, Hull HU3 2BN England
 Trade Mark of / Marque de commerce de Smith & Nephew
 This product may be covered by one or more US Patents.
 See: www.smith-nephew.com/patents

Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
 Allemenstraße 14, 78532 Tuttlingen, Germany

Kit packaged in UK with individual components made in the following countries: Batteries - Origin as marked, Pump - China, Clip - China, Tubing - UK.


CE
2797
Segurança
INMETRO

Rx only
STERILE EO
MR
100%
100%
100%

14

18303736 25583

福
 奇縫章
 器輸
 生福
 利

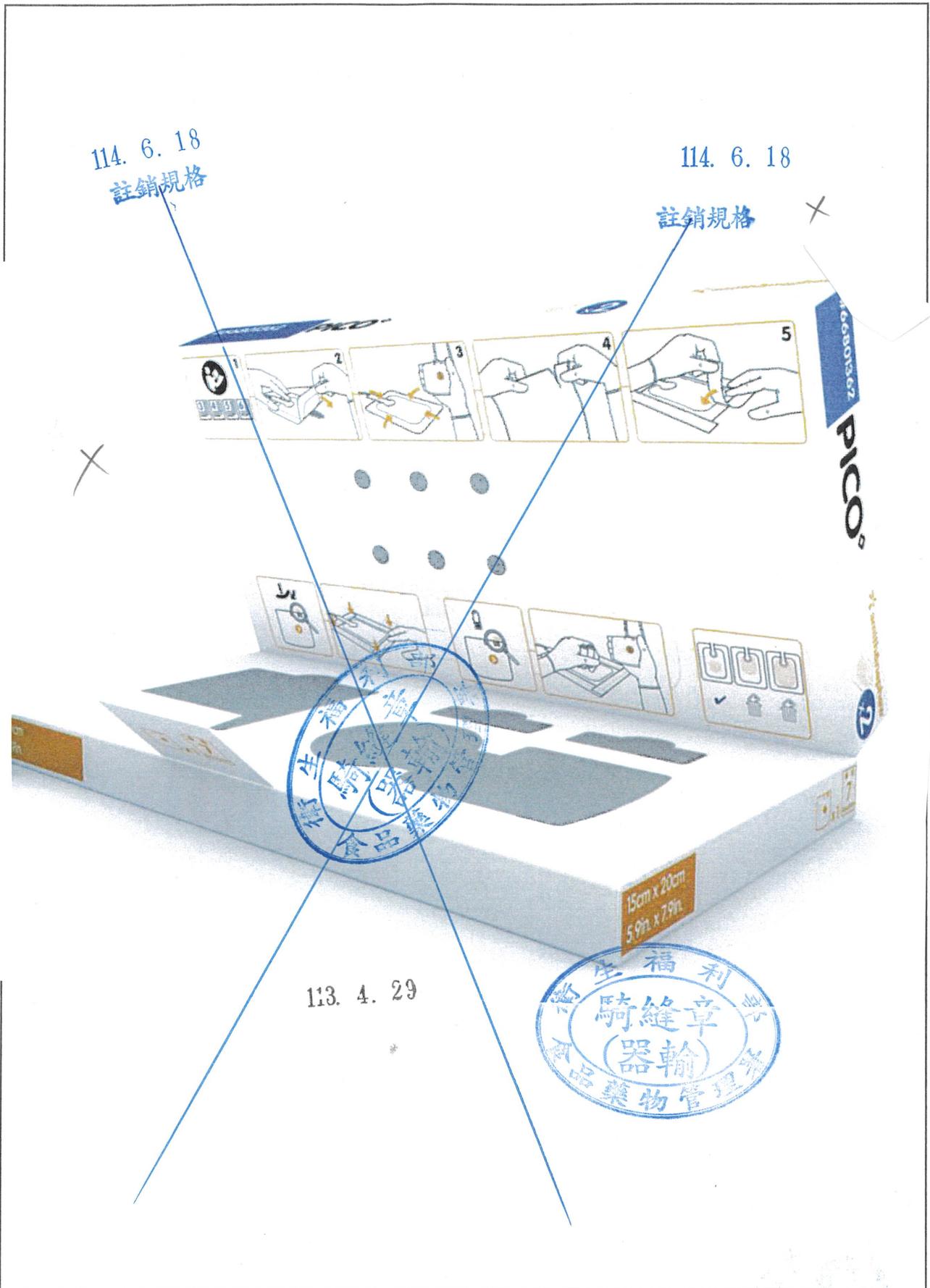

114. 6. 18
註銷規格

114. 6. 18
註銷規格

113. 4. 29

福
奇縫章
器輸
物管

福
奇縫章
器輸
物管

- ※ 裝訂中文說明書擬稿、最小包裝、標籤，領證時請檢附正本。
- ※ 中文說明書擬稿包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
- ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核，

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	“史耐輝”掌上型負壓傷口治療機	申請醫療器材商	英商史耐輝股份有限公司台灣分公司
--------	-----------------	---------	------------------

REF 66802040
Multisite
15cm x 20cm
5.9in. x 7.9in.

5 000223 495367
PZN - 1528457

14

REF 66802040
Multisite
15cm x 20cm / 5.9in. x 7.9in.



QUIET PUMP
UP TO 14 DAYS
HIGH AIR LEAK TOLERANCE
DRESSING FULL INDICATOR
AIRLOCK LAYER
80% EXUDATE EVAPORATION
LOW TO MODERATE
SILICONE ADHESIVE
SHOWER PROOF DRESSING

14



PICO[◇] 14
Single Use Negative Pressure
Wound Therapy System



PICO[◇] 14
Single Use Negative Pressure
Wound Therapy System

REF 66802040
Multisite
15cm x 20cm
5.9in. x 7.9in.

14

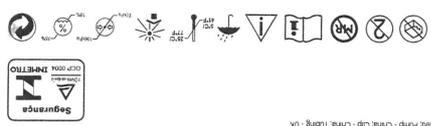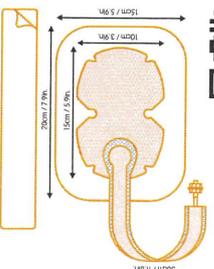

- ① Système de traitement des plaies par pression négative à usage unique
- ② Unterdruck-Wundtherapie-System „PICO“ Einmalprodukt
- ③ Sistema de vácuo de heridas mediante presión negativa de un solo uso
- ④ Sistema per la terapia a pressione negativa monouso
- ⑤ Negative drucktherapie set voor eenmalig gebruik
- ⑥ Lontopu Geoprotecto PICO14 Apvntiik Pienok Micok Xphtocuc
- ⑦ Sitchehnding med negatiiv trakk-system til engangsbruk
- ⑧ Sitchehnding med negatiiv trakk-system for engangsbruk
- ⑨ Sitchehnding med negatiiv trakk-system for engangsbruk
- ⑩ Sitchehnding med negatiiv trakk-system for engangsbruk
- ⑪ System pentru tratarea ranilor cu presiune negativă, de unică folosință
- ⑫ Sistem jednonozowego ukladu do leczenia ran przy użyciu podciśnienia
- ⑬ Vakuumsaugsystem einstufige Anwendung
- ⑭ Vakuumterapiasystem einstufige Anwendung
- ⑮ Egzuzmeszárilagos negatív nyomású sebekelési terápia rendszer
- ⑯ Yakuümte vakuumite zardü girdimo sistema
- ⑰ Yakuüm terapias sistem birliçü erishemeli, pialietolir negatly
- ⑱ Tek küllämnik negatiiv basnçly yara tedavisi sistemini
- ⑲ Ledenozoviy sistem pro poddavlivoi terapii ran
- ⑳ Uñkordatsk kasatimatsk: indidid dardhku kasatly
- ㉑ haidhodudvaynd
- ㉒ haidhodudvaynd
- ㉓ haidhodudvaynd
- ㉔ haidhodudvaynd
- ㉕ haidhodudvaynd
- ㉖ haidhodudvaynd
- ㉗ haidhodudvaynd
- ㉘ haidhodudvaynd
- ㉙ haidhodudvaynd
- ㉚ haidhodudvaynd
- ㉛ haidhodudvaynd
- ㉜ haidhodudvaynd
- ㉝ haidhodudvaynd
- ㉞ haidhodudvaynd
- ㉟ haidhodudvaynd
- ㊱ haidhodudvaynd
- ㊲ haidhodudvaynd
- ㊳ haidhodudvaynd
- ㊴ haidhodudvaynd
- ㊵ haidhodudvaynd
- ㊶ haidhodudvaynd
- ㊷ haidhodudvaynd
- ㊸ haidhodudvaynd
- ㊹ haidhodudvaynd
- ㊺ haidhodudvaynd
- ㊻ haidhodudvaynd
- ㊼ haidhodudvaynd
- ㊽ haidhodudvaynd
- ㊾ haidhodudvaynd
- ㊿ haidhodudvaynd

QUIET PUMP
UP TO 14 DAYS
HIGH AIR LEAK TOLERANCE
DRESSING FULL INDICATOR
AIRLOCK LAYER
80% EXUDATE EVAPORATION
LOW TO MODERATE
SILICONE ADHESIVE
SHOWER PROOF DRESSING

REF 66802040
Multisite 15cm x 20cm / 5.9in. x 7.9in.

REF 66802040
Multisite
15cm x 20cm
5.9in. x 7.9in.

14

PICO[◇] 14
Single Use Negative Pressure
Wound Therapy System

REF 66802040
Multisite
15cm x 20cm
5.9in. x 7.9in.

14

PICO[◇] 14
Single Use Negative Pressure
Wound Therapy System



“史耐輝”掌上型負壓傷口治療機

"Smith & Nephew" PICO Single Use Negative Pressure Wound Therapy System

衛部醫器輸字第 025975 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

本產品以無菌單次使用產品型式供應，若包裝已開啟或破損，則請勿使用。

產品敘述

PICO

本產品乃由一只幫浦及兩件無菌敷料構成。本產品可維持負壓傷口治療(NPWT)在 80 mmHg(額定值)壓力大小的傷口表面。滲出液的控制乃敷料經由吸收與透過外層薄膜蒸發濕氣達到的效果。

本產品適用於的傷口大小(表面積乘以深度)在 400 cm³ 以上、滲出液低至中量。

PICO 7

本產品由一只幫浦及無菌敷料構成。本產品在傷口表面可維持負壓傷口治療(NPWT)在 80 mmHg(額定值)的壓力值。滲出液的控制乃敷料經由吸收與透過外層薄膜蒸發濕氣達到的效果。

本產品可使用長達 7 日：雙敷料組適用於的傷口滲出液低至中量。單敷料組則可用於滲出液低量傷口。傷口滲出液中量則需要額外敷料配合使用。敷料與管線間有收集過濾器，避免液體流入管線並進入幫浦。低滲液傷口為 24 小時可滲出 0.6g 液體/cm² 的傷口面積。中量滲液傷口則為 24 小時滲出 1.1g 液體/cm² 的傷口面積。1g 滲液相當於 1ml 滲液。敷料更換頻率可被許多因素影響，像是傷口類型、傷口大小、滲出液流速和容量，周遭環境等。

PICO 7Y

本產品可同時對兩個傷口表面可維持負壓傷口治療(NPWT)在 80 mmHg(額定值)的壓力值。滲出液的控制乃敷料經由吸收與透過外層薄膜蒸發濕氣達到的效果。

本產品預計可在低滲出傷口上使用長達 7 日。對於中度滲出傷口，本產品最多可使用 4 日。如果在中度滲出傷口上使用 7 天，則需要額外的敷料(需另外購買)。

PICO 14

本產品由幫浦、延長管、電池、無菌敷料和固定帶組成。本產品在傷口表面可維持負壓傷口治療(NPWT)在 80 mmHg(額定值)的壓力值。滲出液的控制乃敷料經由吸收與透過外層薄膜蒸發濕氣達到的效果。



本產品預計使用時間長達 14 日。對於低滲出傷口，每片敷料的使用期限最多為 7 日。對於中度滲出的傷口，每片敷料的使用期限最多為 4 日。如果在中度滲出傷口上使用 14 日，則需要額外的敷料（可單獨購買）。

敷料與管線間有收集過濾器，避免液體流入管線並進入幫浦。低滲液傷口為 24 小時可滲出 0.6g 液體/cm² 的傷口面積。中量滲液傷口則為 24 小時滲出 1.1g 液體/cm² 的傷口面積。1g 滲液相當於 1ml 滲液。敷料更換頻率可被許多因素影響，像是傷口類型、傷口大小、滲出液流速和容量，周遭環境等。根據需要，額外的敷料可單獨購買。

適應症

本產品適用於傷患可藉由抽吸裝置(負壓傷口治療)受益，因其可去除少至中量滲出液及感染性物質，進而促進傷口癒合。適合醫院及居家照護使用*。

適用傷口類型包括如下：

- 慢性
- 急性
- 創傷
- 亞急性及撕裂傷口
- 部分皮層燒傷
- (糖尿病或壓力性)潰瘍
- 皮瓣及移植
- 手術後的封閉切口*

*僅 PICO 7, PICO 7Y, PICO 14

禁忌症

本產品使用的禁忌包括如下：

- 傷口基部或邊緣存在惡性腫瘤(但若做為改善生活品質之安寧照護措施，則不在此限)
- 先前已確定但未接受治療之骨髓炎
- 未經發現之非腸道瘻管
- 壞死組織伴隨焦痂
- 動脈、靜脈、神經或器官外露
- 血管吻合處外露
- 緊急呼吸道吸入症
- 胸膜、縱隔或胸管抽液
- 手術抽吸

幫浦放置警告

幫浦包含一塊磁鐵。始終保持本產品與其他醫療設備保持至少 10 公分的距離。否則可能會導致其他醫療設備失效，進而導致嚴重傷害，包括死亡。



13. 4. 2

警告

1. 本產品幫浦內含磁鐵，與其他醫療器材近距離接觸時易交互影響。幫浦放置位置務必遠離其他易受磁場影響之醫療器材 10 公分以上。包含但不僅限於以下醫療器材：

- 植入式心律整流除顫器(ICD)
- 心臟節律器
- 胰島素幫浦
- 分流閥
- 神經刺激器
- 植入式人工耳蝸

此警語適用所有使用者及其照護者。您必須保持幫浦距離其他儀器 10 公分以上：

- 如果您正使用電子醫療器材並照顧使用本產品之病患
 - 如果病患在公共區域使用本產品，且可能與其他使用電子醫療儀器人士近距離接觸
2. 某些病患具有高度的出血併發症風險，若未予以控制，將可能致命。請務必密切監測病患出血狀況。若發現突發出血或出血量過多，請立即拔除幫浦，將敷料留置原位，採取適當止血措施，並立即尋求醫療協助。
3. 接受本產品治療的病患並非不可接受抗凝血劑，惟必須於使用敷料前止血。若病患止血困難，或正接受抗凝血治療，將可能提高出血的風險。治療期間應避免使用可能會提高出血風險的止血產品。請務必於治療期間不斷地進行評估。
4. 請保持幫浦、管線和連結處不會：
- 置於可能對病患造成壓力傷害的位置。
 - 線路散落地板，可能使人員遭絆倒，或裝置受到汙染。
 - 可能纏繞病患，或對病患造成壓迫。
 - 置於熱源上，或經過熱源。
 - 纏繞於衣物或繃帶下方，使負壓受到阻隔。
5. 銳利邊角應予以覆蓋傷口內骨骼碎片應予以取出，否則使用本產品實施負壓時，可能會造成刺穿器官或血管之風險。
6. 若需要去顫處置時，請於使用前將幫浦連接敷料的線路取下。若敷料置於可能影響去顫器的位置，請將敷料移除。
7. 不具磁振造影安全性：本產品與磁振造影(MRI)設備不相容，請勿將本產品攜入磁振造影室。
8. 先前未曾以兒童為對象，進行本產品相關試驗。使用此治療時，應考量病患體型與體重。
9. 本產品不適合於具爆炸風險的區域(例如：高壓氧治療室)使用。
10. 本產品包含小型組件，可能會導致年幼兒童窒息。請遠離兒童伸手可及處。
11. 本產品不適合與易燃性麻醉物(含氧氣或一氧化二氮)同時使用。
12. 敷料應該由專業醫事人員協助使用及更換。除非醫事人員專業評估，否則病人不應該自行移除敷料。
13. 一片敷料僅適用於一個傷口。



14. 本產品須遠離寵物。寵物與其他動物可能會損壞本產品。
15. 請勿擅自維修更換本產品。

注意事項

1. 本產品包含磁鐵。
2. 請注意下列出血併發症風險較高的病患：
 - 正接受抗凝血劑/血小板凝集抑制劑治療，或活動性出血。
 - 脆弱或易破裂血管，或傷口接近或在器官，上述可能因血管接合、感染、創傷或輻射等引起。
 - 傷口止血困難。
 - 營養不良且未接受治療。
 - 遵囑性不佳或具有攻擊性。
 - 傷口位於血管或脆弱肌膜旁。
3. 敷料僅可由專業醫療人員使用。敷料不得由病患取下或更換。
4. 使用中發生疼痛、發紅、異味、過敏或滲液忽然改變流量或顏色，請聯繫專業醫事人員。
5. 本產品使用於支持皮膚移植傷口，必須定期目視檢視機器運作正常。尤其是治療第一週，必須確認負壓傷口治療持續進行且維持密封狀態。
6. 若將本產用於受感染的傷口，將必須提高更換敷料的頻率。為監測感染徵象，應定期監測傷口狀態。
7. 若經認定臨床狀況許可，以敷料圍繞缺血的肢體或施加負壓時，應避免導致循環受阻。
8. 本產品無警示音設計，請隨時攜帶幫浦，供病患/專業醫療人員定時確認狀態。
9. 本產品可置於衣物/被單內，但此時不得將敷料膜等阻塞性材料覆蓋敷料貼片，否則將導致裝置性能受損。
10. 敷料切勿用堅硬且固定裝置或石膏覆蓋。因為它們可能會過度施加壓力並導致傷口部位的組織損傷，尤其是管線進入敷料處。
11. 長時間在敷料上放置堅硬或不透明的材料可能會妨礙定時檢查和評估傷口，並中斷計劃性或敷料需要更換時間。
12. 將本產品使用於皮膚脆弱的病患時，應於設置固定帶的位置使用 *SECURA No-sting Barrier Film* 等皮膚保護劑。若固定帶使用不當或重複使用，將導致皮膚脫落。
13. 將本產品使用於皮膚脆弱的病患時，應於設置固定帶的位置使用 *SKIN-PREP(hard port)/SECURA(soft port)* 等皮膚保護劑。若固定帶使用不當或重複使用，將導致皮膚角質化。
14. 若出現發紅或敏感等狀況，請停止使用，並與給予治療的專業醫療人員聯絡。
15. 請勿將本產品搭配凡林等油性產品使用，否則將導致密封效果不佳。
16. 若搭配傷口填料使用時，將可能產生組織長入泡綿填料的風險。將泡綿填料搭配本產品使用時，可透過使用無黏性傷口接觸敷料或提高更換敷料頻率等方法，以避免組織長入填料的狀況。



17. 本產品可搭配手術引流管使用，惟敷料不得覆蓋於管線引出之皮膚開口處。手術引流管應於皮膚下方使之遠離敷料邊緣，不與本產品相互影響。
18. 必須保護幫浦遠離液體來源，例如尿失禁或溢出。如觀察到液體進入機器，則停止使用本品。
19. 洗澡時，應將本產品幫浦與敷料分離。為避免水流進入管線，請必將接於敷料的管線末端指向地面。
20. 請勿拆下幫浦。
21. 敷料不得搭配其他抽吸幫浦使用。
22. 請勿調整、切割或拉扯管線或軟管(soft port)。
23. 請勿切割敷料，否則將導致負壓傷口治療效果不佳。為貼合不平整區域，傷口薄膜最多可裁切至邊緣 1 公分的位置。
24. 請務必將敷料置於傷口中央上方，開口應置於接觸皮膚最上方且勿超出傷口，以降低開口周圍蓄積液體及負壓效果受影響。
25. 電腦斷層掃描及 X 光可能會對某些電子醫療裝置造成干擾。在情況許可的範圍，請將幫浦遠離 X 光或掃描器操作。若將幫浦置入電腦斷層掃描及 X 光操作範圍，請於程序完成後確認系統是否仍可正常運作。
26. 此系統僅供單次使用，若此系統任何零件使用超過一位病患，將可能造成交叉汙染及感染。
27. 高溫及濕氣可能會影響敷料的使用次數。
28. 行進間出現的無線頻率可能干擾影響 PICO 之性能。若幫浦發生功能異常，請更換電池。若狀況無法改善，請聯絡專業醫療人員，要求更換系統。本產品不得於飛機上使用，請於登機時將電池取出。
29. 本產品為醫院及居家照護使用。也可於飛機、汽車、火車及船運輸中使用。行進間出現的無線頻率可能干擾影響本產品之性能。若幫浦發生功能異常，請更換電池。若狀況無法改善，請聯絡專業醫事人員，要求更換系統。
30. 基本上，一般無法避免各環境中的電磁干擾。當本產品接近射頻辨識讀取器、防盜設備或金屬探測器等電子設備，請特別小心。
31. 黏貼敷料時，避免邊緣與其他片敷料重疊。

不良反應

若因傷口抽吸而引發過度出血，將可能帶來嚴重風險，導致病患死亡或造成嚴重傷害。慎選病患，請務必遵循上述禁忌症、警語與注意事項。請仔細監測傷口及敷料，確認病患失血狀態。若滲出物流量與顏色突然發生變化，請通知專業醫療人員。



產品規格

PICO

最大尺寸	85 x 85 x 25mm
重量	<120g
最大吸力	100 mmHg
操作模式	Continuous
儲存/運輸	5 - 25°C, 10-75% RH 700 to 1060 mbar atmospheric pressure
操作環境	5 - 35°C, 10-95% RH 700 to 1060 mbar atmospheric pressure

PICO 7

幫浦尺寸	65 x 78.5 x 21mm
幫浦重量(含電池)	<108g
電池種類	2x AA 1.5V (LR6/FR6)
防護等級	IP22
最大吸力	100 mmHg
操作模式	Continuous
儲存/運輸	5 - 25°C, (-25~+5°C, 七天)10-75% RH 700 to 1060 mbar atmospheric pressure
操作環境	5-40°C, 10-95% RH 700 to 1060 mbar atmospheric pressure

PICO 7Y

幫浦尺寸	65 x 95 x 21mm
幫浦重量(含電池)	<100g
電池種類	2 x AA 1.5V (FR6)
防護等級	IP22
最大吸力	100 mmHg
操作模式	Continuous
儲存/運輸	5 - 25°C, (-25~+5°C, 七天)10-75% RH 700 to 1060 mbar atmospheric pressure
操作環境	5-40°C, 10-95% RH 700 to 1060 mbar atmospheric pressure



PICO 14


幫浦尺寸	65 x 78.5 x 21mm
幫浦重量(含電池)	<108g
電池種類	2 x AA 1.5V (LR6/FR6)
防護等級	IP22
最大吸力	100 mmHg
操作模式	Continuous
儲存/運輸	5 - 25°C, (-25~+5°C, 七天)10-75% RH 700 to 1060 mbar atmospheric pressure
操作環境	5-40°C, 10-95% RH 700 to 1060 mbar atmospheric pressure

型號規格

PICO

114. 6. 18 註銷規格

型號	規格 (2 dressings, 1 pump, secondary fixation strips)
× 66801356	Multisite 15 x 20
× 66801357	Multisite 20 x 25
× 66801358	10cm x 20cm
× 66801359	10cm x 30cm
× 66801360	10cm x 40cm
× 66801361	15cm x 15cm
× 66801362	15cm x 20cm
× 66801363	15cm x 30cm
× 66801364	20cm x 20cm
× 66801365	25cm x 25cm

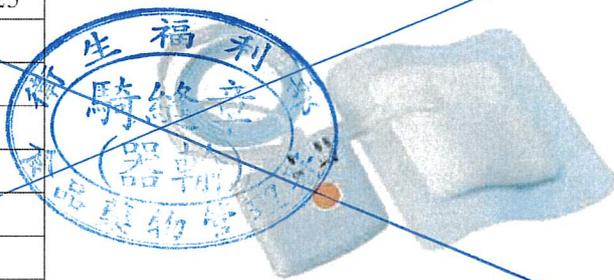


114. 6. 18 註銷規格



3. 4. 29

PICO 7


單敷料組*	雙敷料組**	敷料尺寸
66802010	66802000	Multisite small 15cm x 20cm
66802011	66802001	Multisite large 20cm x 25cm
66802012	66802002	10cm x 20cm
66802013	66802003	10cm x 30cm
66802014	66802004	10cm x 40cm

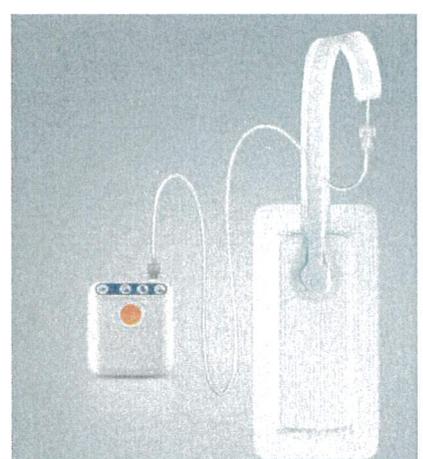

66802015	66802005	15cm x 15cm	
66802016	66802006	15cm x 20cm	
66802017	66802007	15cm x 30cm	
66802018	66802008	20cm x 20cm	
66802019	66802009	25cm x 25cm	

*單敷料組包含: 1 敷料.1 幫浦. 2 電池

**雙敷料組包含: 2 敷料.1 幫浦. 2 電池

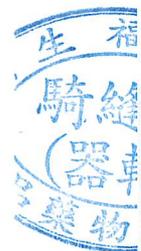


113. 4. 2

PICO 7Y


66802031	PICO 7Y (2 x large Multisite dressings, 1 pump & pump clip, fixation strips, 2 extension tubes.)

PICO 14

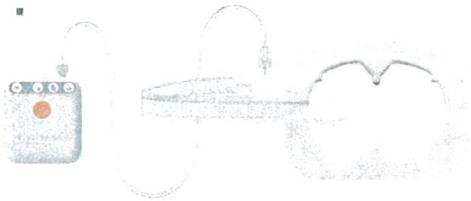雙敷料組*	敷料尺寸	
66802040	Multisite small 15cm x 20cm	
66802041	Multisite large 20cm x 25cm	
66802042	10cm x 20cm	
66802043	10cm x 30cm	
66802044	10cm x 40cm	
66802045	15cm x 15cm	
66802046	15cm x 20cm	
66802047	15cm x 30cm	
66802048	20cm x 20cm	
66802049	25cm x 25cm	

* 雙敷料套裝包括 2 塊敷料、1 個幫浦和幫浦夾、輔助固定帶。用於低滲出液傷口 - 最長可使用 14 天。對於中滲出液傷口，需額外購買敷料（可單獨購買）。

敷料組**

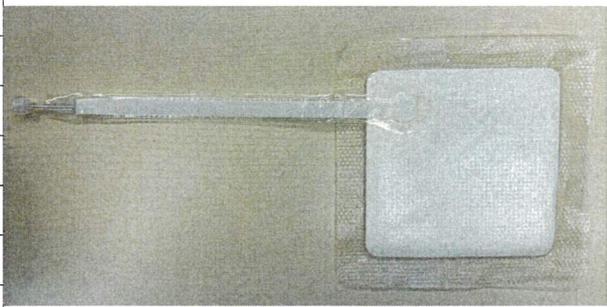66802020	Multisite small 15cm x 20cm	
66802021	Multisite large 20cm x 25cm	
66802022	10cm x 20cm	
66802023	10cm x 30cm	
66802024	10cm x 40cm	
66802025	15cm x 15cm	
66802026	15cm x 20cm	
66802027	15cm x 30cm	
66802028	20cm x 20cm	



66802029	25cm x 25cm
----------	-------------

** 一組敷料多包裝包括 5 片個別包裝的無菌敷料，輔助固定帶。

製造業者名稱：Smith & Nephew Medical Limited


製造業者地址：101Hessle Road, Hull, HU3 2BN, United Kingdom

醫療器材商名稱：英商史耐輝股份有限公司台灣分公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)



Product Picture

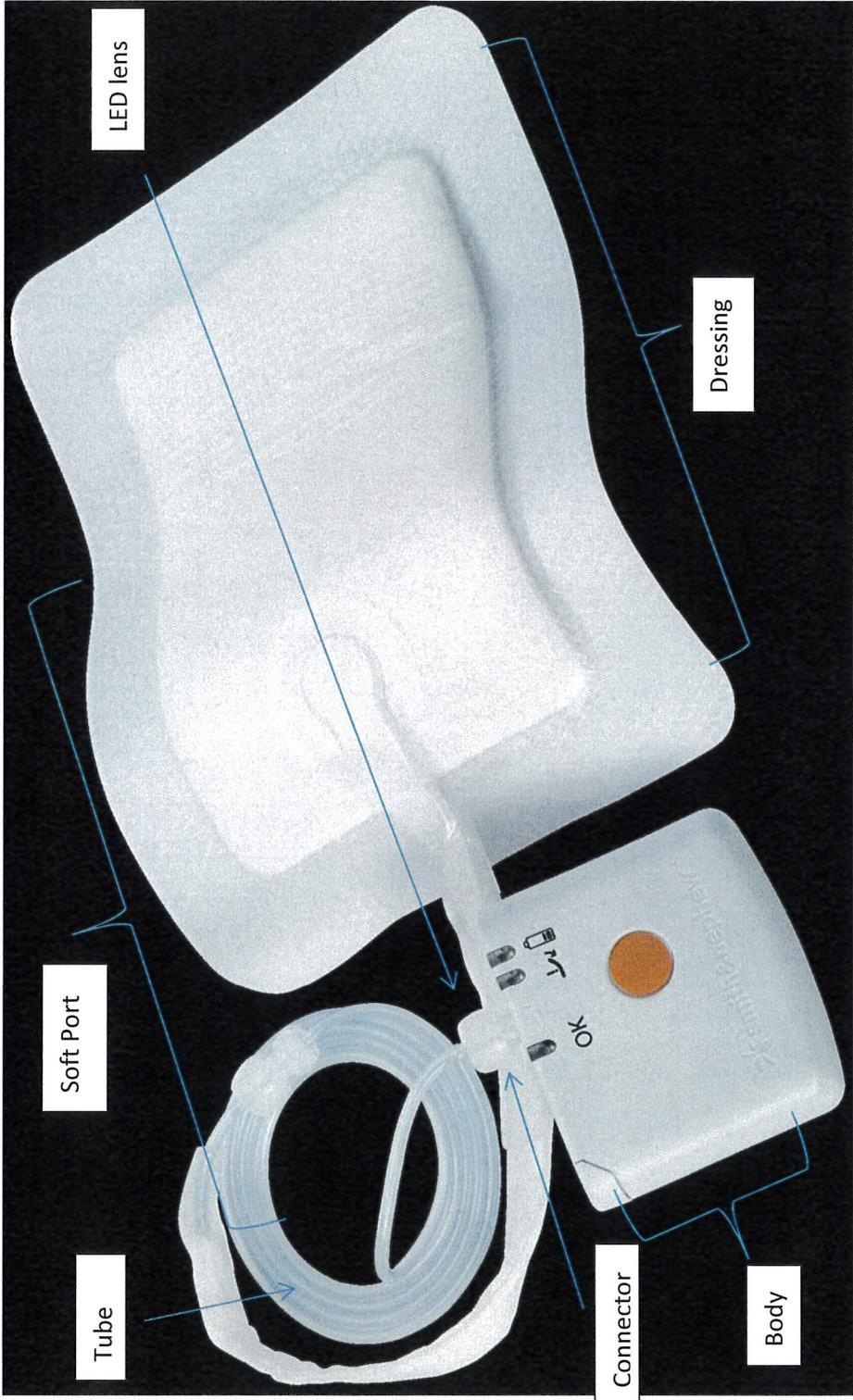

Handwritten blue scribble or signature.